




SCHEMA TECNICA

Auto-Pure

COD. AS-17040-00

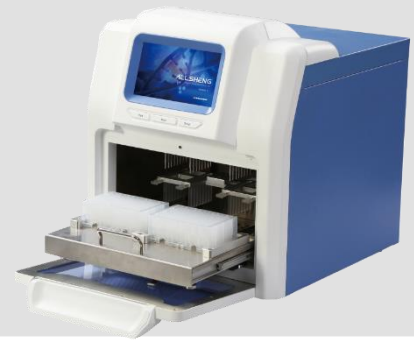

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO



Auto-Pure è un estrattore automatico degli acidi nucleici basato sulla metodica di estrazione con biglie magnetiche. Strumento con Software aperto e configurabile per diverse esigenze. Illuminazione a LED, visualizzazione in tempo reale dello stato di funzionamento, tramite touch screen da 7 pollici. Possono essere processati, in ogni seduta analitica, un numero di campioni variabile, anche singolarmente tra 1 e 32 senza sprechi. Tempo massimo di estrazione pari a 45 minuti. *

È dotato della funzione di sterilizzazione tramite lampada UV per evitare contaminazioni incrociate. Dotato di porta USB per esportare i report dei test effettuati.

COD. AS-17040-00

DIMENSIONI	400 mm x 470 mm x 450 mm
PESO	28 Kg
CAPACITÀ DI PROCESSO	1 ~32 campioni
VOLUME DELLA MATRICE BIOLOGICA	50 ~1000µl
TEMPERATURA	T.A. ~120°C.
ACCESSORI COMPRESI	Touch Screen da 7 pollici – Mouse e penna USB
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE	8 programmi precaricati; 100 programmi memorizzabili
INTERFACCIA	USB, Porta Ethernet
CONTROLLO PREVENTIVO	Ventilazione e Sterilizzazione UV

*associato ai nostri kit di estrazione, che sono pronti all'uso.